

# Quick Start Guide italiano



Grafico di cottura  
Programmazione della fornace




MiYO  
Workbook



## ESTETICA STRATIFICATA - COME PERSONALIZZARE UN MONOLITICO

MiYO pink è un sistema a base di paste ceramiche opalescenti, fluorescenti per colorare strutturare e glasare.  
Con MiYO pink è possibile raggiungere dei risultati estetici in modo semplice e veloce, paragonabile a delle restaurazioni stratificate. Il tempo dedicato equivale ad una colorazione.

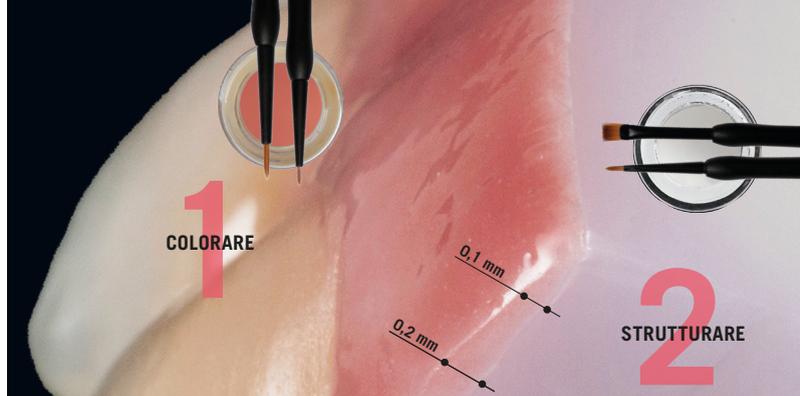

### PREPARAZIONE

- Prima dell'applicazione delle masse la superficie deve essere pulita e detersa.
- La superficie può essere sabbata con 50 my di ossido di alluminio ad una pressione di 2 bar.

### ISTRUZIONI D'USO

- Non versare il liquido in eccedenza fuori dal contenitore.
- Mescolare accuratamente MiYO Color, MiYO Structure e glaze paste con una spatola non metallica.
- Le paste non devono venire a contatto con l'acqua.
- Usare sempre un pennello pulito ed asciutto.

### APPLICAZIONE

- Applicazione delle masse sulla superficie preparata secondo l'indicazione.

### STORAGE

- Conservare in ambiente secco tra +12°C e +38°C.



### PARAMETRI DI COTTURA\*

### COLOR | STRUCTURE | GLAZE PASTE

	ZrO <sub>2</sub>	InSync Zr	Litio-disilicato	Press to Zirkon
Temperatura iniziale [°C]	400 - 450	400 - 450	400 - 450	400 - 450
Asciugatura [min]	3	3	3	3
Tempo di chiusura [min]	4	4	4	4
Incremento termico [°C/min]	45	45	45	45
Mantenimento 1 [s]	30 - 45	30 - 45	30 - 45	30 - 45
Inizio vuoto [°C]	580	580	580	580
Temperatura finale [°C]	720	720	710	720
Fine vuoto [°C]	720	720	710	720
Mantenimento 2 [s] **	30 - 60	30 - 60	30 - 60	30 - 60
Tempo d'apertura [min]	1	1	1	1

\* I valori di cottura che seguono sono valori indicativi che possono variare secondo il tipo di forno.

\*\* In base al grado di lucentezza desiderato, il tempo di mantenimento è di 30 - 60 secondi.

Si prega di notare le informazioni sulla gestione degli incendi e la programmazione della stufa - codice QR in prima pagina -